

## 电热恒温鼓风干燥箱


### Electric Blast Drying Oven

#### 使用范围:

- 适用于电工、电子、仪表、材料、医药、高校等科研单温以及工矿企业和生产单位，对物品的干燥、烘培、热处理、消毒、保温等试验。

#### 产品特点:

- 微电脑控制器，控制温度精确可靠，控制稳定、操作方便、寿命长。
- 采用流线型圆弧设计，外壳冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆均为镜面不锈钢材料制成，半圆形四角设计使清洁更方便。
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁。
- 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量，箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条合理风道和循环系统，使工作室温度均匀性良好；采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。
- RS485 接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数。（选配）
- 微型打印机可实时打印温度曲线和数据，以备可溯源。（选配）

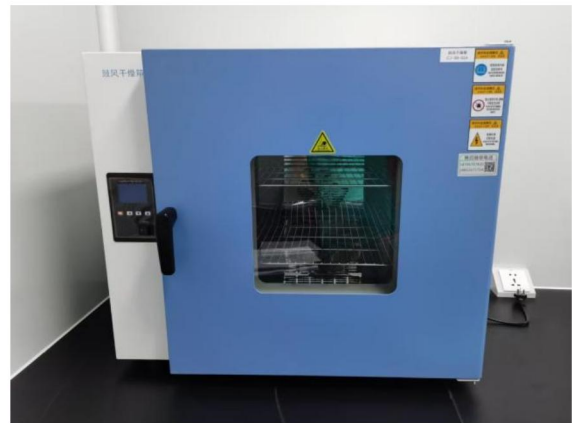

台式

#### 主要配置:



#### 技术参数:

型号	XI-D0-30A /XI-D0-30B (台式)	XI-D0-70A /XI-D0-70B (台式)	XI-D0-140A /XI-D0-140B (台式)	XI-D0-240A /XI-D0-240B (台式)	XI-D0-420A /XI-D0-420B (立式)	XI-D0-620A /XI-D0-620B (立式)	XI-D0-920A /XI-D0-920B (立式)
容积 (L)	30	70	140	240	420	620	920
温度范围	RT+10~150°C (A 型号)/RT+10~200°C (B 型号)						
温度波动度	≤±0.5°C						
温度均匀度	≤±2.5°C						
微型打印机	选配						
工作环境温度	+5~40°C						
内胆材质	201 镜面不锈钢 (标配)、304 镜面不锈钢 (定制)、316 镜面不锈钢 (定制)						
外壳材质	冷轧钢板喷塑						
工作电源	AC220V±10% 50HZ				AC380V±10% 50HZ		
安装功率 (W)	750	1050	1500	2100	4000	4500	6000
载物板	2 层	2 层	2 层	2 层	2 层	4 层	4 层
内部尺寸 (mm)	320X340X320	400X450X450	450X550X550	500X600X750	585X640X1355	600X840X1355	700X800X1590
外形尺寸 (mm)	440X620X490	530X740X630	580X840X730	630X880X930	730X780X1780	800X980X1880	880X1050X2060

注：尺寸标注为 D\*W\*H (深\*宽\*高)，以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告 (选配)