

步入式药品稳定性试验室（室内机）

Walk-In Pharmaceutical Stability Test Room

使用范围：

- 以科学的方法创造一个对药品失效评测所需的温湿度环境。
- 方便大批量药品储存，可进行长期耐潮湿循环试验。


产品特点：

- 采用进口品牌优质部件，保证长期连续运行，性能稳定可靠。
- 进口品牌触屏温湿度控制器，显示清晰直观、控制稳定、方便操作。
- 进口品牌高精度湿度传感器，灵敏度高、漂移小、无需维护。
- 进口品牌全封闭耐热型压缩机，采用环保制冷、低噪音、寿命长。
- 标配嵌入式微型打印机，可实时打印温湿度曲线和数据。
- 标配符合 FDA 标准的监测记录系统，双重记录让数据更安全。
- 标配以太网接口连计算机，对单台或多台仪器进行控制以及实验数据的实时记录备份。
- 标配 4G 温湿度超差、停电手机短信报警功能，一张手机卡能知晓多台仪器的运行状况。
- 配备大门钥匙锁和防反锁装置，防止无关人员影响实验，人在实验室内可安全退出。
- 配置循环供水系统，解决了经常加水、水箱清洗和无排水管道的问题，极大延缓水系统长菌难题。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关要求中的加速、长期、中间和高温高湿试验。
- 提供符合国际标准的 IQ、OQ、PQ 验证资料。
- 制造执行标准（技术条件）：参照 GB/T 10586-2025。



（压缩机户内放置）

主要配置：

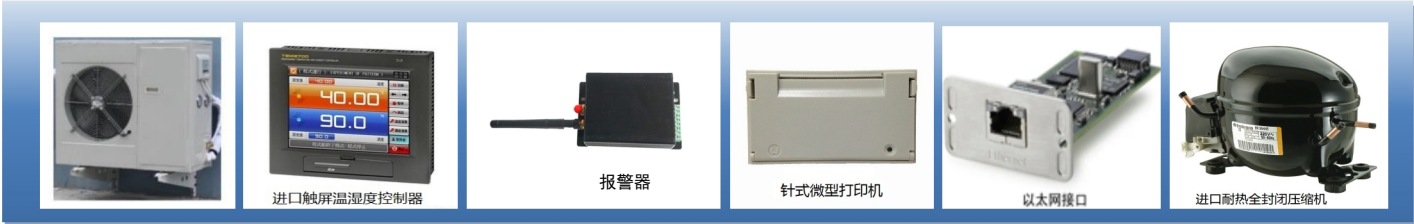

技术参数：

型号	XI-9000VOL-FD	XI-15000VOL-FD	XI-30000VOL-FD	XI-40000VOL-FD	XI-***VOL-FD
容积（M³）	9	15	30	40	5-500 定制
温度范围	20~50℃				
温度波动度	≤±0.5℃				
温度偏差	≤±1℃（均匀度≤2℃）				
湿度范围	40~90%R.H				
湿度偏差	≤±3%R.H				
加湿方式	电热蒸汽式加湿器（外加湿，更节能；避免二次污染更方便维护保养）				
工作环境温度	+5~40℃				
内胆材质	304 镜面不锈钢				
外壳材质	冷轧钢板喷塑				
安全装置	电源过载、独立超温、压缩机过载、超压、水堵、缺水保护				
工作电源	AC220V±10% 50HZ	AC220V±10% 50HZ	AC220V 或 380V±10% 50HZ		
安装功率（W）	3500	4500	5500	4500	根据用户容积确定
载物架	4 只/4 层	4 只/4 层	8 只/4 层	12 只/4 层	根据用户容积确定
内部尺寸（mm）	2000X2100X2200	2000X3400X2200	3600X3780X2200	3600X5050X2200	根据用户现场尺寸确定
外形尺寸（mm）	2200X2300X2400	2200X3600X2400	3800X3980X2400	3800X5250X2400	根据用户现场尺寸确定
备注	运行功率是开启 1 套压缩机做 40℃/75%RH 空载实测数据；载物货架镀镍、不锈钢等多种选配				

注：尺寸标注为 D*W*H（深*宽*高），以上参数在标准条件下测得； 可提供计量部门第三方测试报告（选配）